

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



SeedOS Ltd

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services
26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom
Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com
Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

**AGO PER ANESTESIA SUBARACNOIDEA
NEEDLE FOR SUBARAGHNOID ANAESTHESIA**

DURAJECT[®]



■ Ago introduttore (a richiesta)
Introducer needle (on request)

■ Pareti non-coring
Rounded edges prevent coring

■ La speciale fessura permette un ottimo flusso di anestetico
Special opening allows CSF to flow freely

■ La punta ad ogiva penetra tra le fibre della dura mater senza tagliarle

■ Conical point spreads dura fibers, doesn't cut

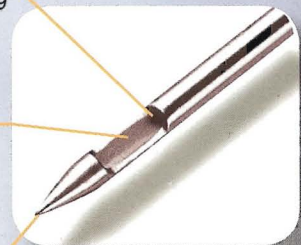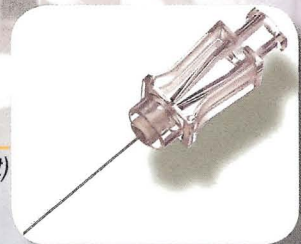

AGO PER ANESTESIA SUBARACNOIDEA

NEEDLE FOR SUBARACHNOID ANAESTHESIA

Il rischio di emicrania post-spinale può essere ridotto non solo con l'utilizzo di aghi sottili, ma anche mediante una diversa geometria della punta dell'ago.

The risk of post-spinal hemicrania, can be reduced not only by using fine needles, but also through a different geometry of the needle point.

I due taglienti dei classici aghi per anestesia provocano un'incisione a "V" della *dura mater*.

The two cutting edges of standard anaesthesia needles make a "V" incision of the *dura mater*.

Gli aghi con "punta a matita" (pencil point) non hanno alcun tagliente. Il foro nella *dura mater* si può quindi ottenere più tramite dilatazione che tramite taglio.

"Pencil-point" needles don't have any cutting edge. The hole through *dura mater* can therefore be performed more through dilatation than cutting.

Basandosi sulle più avanzate tecniche di produzione STERYLAB ha sviluppato un nuovo ago spinale con punta ad ogiva. Moderate ma pur rilevanti differenze nella geometria hanno permesso di ottenere una punta ed una fessura di diffusione di grandezza e posizione ideali.

Using the most advanced manufacturing techniques, STERYLAB has developed a new pencil-point needle. Small but significant differences in tip geometry facilitate ideal needle placement.

Questo permette:

- buona individuazione del "dura-click"
- chiara differenziazione dei singoli strati di tessuto
- minima profondità di incisione col vantaggio di evitare lesioni al nervo

This allows:

- positive "dura-click" recognition
- clear differentiation of the different tissue layers
- minimal puncture depth and avoidance of nerve lesions

La pluridecennale esperienza di STERYLAB come produttore di aghi speciali ha permesso l'ottimizzazione della geometria e della scelta del materiale di DURA-JECT®, ottenendo un'eccezionale capacità di flessione ed una buona stabilità della punta.

Using our long experience of special needle manufacturing has allowed us to produce DURA-JECT®, with optimised and advanced tip geometry, increased flexibility and point stability, using the best materials available.

DURA-JECT® consente:

- buona manualità
- ottimo riflusso del liquor
- leggera pressione di iniezione
- elevato tasso di riuscita e sicurezza

DURA-JECT® allows:

- ease of use
- optimal liquor flow
- low injection pressure
- safety and high success ratio

DURA-JECT® è disponibile in una vasta gamma dimensionale in grado di soddisfare le diverse esigenze dell'operatore.

DURA-JECT® is available in a wide range of sizes to fulfil the needs of the operator.

AGO INTRODUTTORE

Su richiesta è disponibile, in abbinamento, lo specifico ago introduttore (vedi tabella dimensionale).

INTRODUCER NEEDLE

On request a specific introducer needle is available (see table of sizes).

Monouso, sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

Sterile, single use: reduction of infection hazard.

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

DURAJECT®

CALIBRO
SIZE
G (mm)

LUNGHEZZA
LENGTH
cm

CONFEZ.
PCKG
pz-units

22(0,70) - 23(0,65) - 24(0,55)

25(0,50) - 26(0,45) - 27(0,40)

7 - 9 - 11

25

Come comporre il codice d'ordine / ordering: **DURA-JECT® 25 Gauge - 9 cm = DRJ2509**
Versione con ago introduttore: aggiungere "I" al codice d'ordine / Model with introducer needle: add "I" to the cat. nr.
Altre misure disponibili su richiesta / Other sizes available on request